

**System One 60 Series REMstar Pro und
REMstar Auto**




Taschenhandbuch

PHILIPS
RESPIRONICS

Dieses Taschenhandbuch ersetzt nicht das vollständige Handbuch. Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte den Handbüchern der jeweiligen Geräte.

Bedienelemente

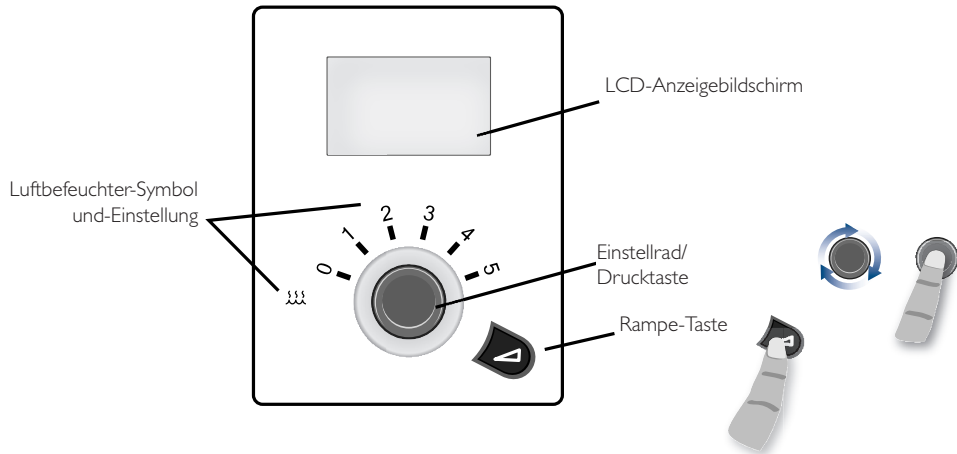

Patientenmenü

| | |
|----------|-------|
| Therapie | Flex |
| Info | Setup |

Therapie



Startet die Therapie durch Druck auf das Einstellrad. Grundstellung des Menüs.

Hinweis: Falls der Patient den Menüknopf versehentlich verdreht, springt System One nach 10 Sek. ohne Aktivität automatisch zurück in das Patientenmenü zu „Therapie“. Der Patient kann durch Drücken des Einstellrads wie gewohnt die Therapie starten.

 ~~R_x~~ Display-Anzeige „SD-Karte eingelegt,Therapie angenommen“

 ~~R_x~~ Display-Anzeige „SD-Karte eingelegt,Therapie abgelehnt“

 Display-Anzeige „SD-Karte falsch eingelegt“

 Display-Anzeige „SD-Karte voll“

 Display-Anzeige „SD-Karte entfernt“

Patientenmenü

| | |
|----------|-------|
| Therapie | Flex |
| Info | Setup |

Flex



Einstellungen zu Flex- und Flex-Demo-Modus.

| | |
|----------|-------|
| Therapie | Flex |
| Info | Setup |

Info

Abfrage von Therapiestunden und Historie wichtiger Therapieparameter (falls vom klinischen Betreuer für den Patienten freigegeben).

| | |
|----------|-------|
| Therapie | Flex |
| Info | Setup |

Setup



Für den Patienten freigegebene weitere Therapieeinstellungen.

| | |
|----------|-------|
| Therapie | Flex |
| Info | Setup |

Abfrage der Therapiestunden

Am Gerätedisplay können vom Patienten die Therapiestunden wie folgt ausgelesen werden:
Im Patientenmenü „Info“ auswählen.



Im Menü „Info“ die Option „Abfrage“ auswählen.



Im Menü „Abfrage“ werden die Therapiestunden angezeigt.



Maskentest

Nur bei System One REMstar im Auto-CPAP-Modus.

Der Maskentest ermöglicht dem Patienten den korrekten Sitz seiner Maske vor der Therapie selbst zu überprüfen. Diese Funktion muss vom klinischen Betreuer für den Patienten freigegeben sein.

Drückt man die Rampe-Taste (siehe Bedienfeld) wenn das Gerät noch keinen Therapiedruck abgibt, startet der Maskentest. Das Gerät gibt für 40 Sek. einen Testdruck ab. Am Ende des Tests gibt ein Häkchen im Display einen guten Sitz der Maske an. Ein Kreuz deutet auf einen noch zu verbessernden Sitz der Maske hin.



Guter Maskensitz



Zu verbessernder Maskensitz

Setup – Einstellungen

Unter der Auswahl „Setup“ im klinischen Menü finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

| | | |
|------------|------------|--------------------------|
| Modus | CPAP | REMstar Pro |
| | CPAP | Auto |
| CPAP-Druck | 4,0 - 20,0 | 4-20 cm H ₂ O |

Nur bei REMstar Auto

| | | |
|----------|------------|---|
| Auto max | 4,0 - 20,0 | Maximaler Therapiedruck (bis zu 20 cm H ₂ O) |
| Auto min | 4,0 - 20,0 | Minimaler Therapiedruck |

| | | | | |
|----------|-----------|--------|----------|-------------|
| | Kein Flex | C-Flex | C-Flex + | REMstar Pro |
| Flex-Typ | Kein Flex | C-Flex | A-Flex | C-Flex + |
| | | | | REMstarAuto |

| | | | | |
|------|---|---|---|------------------------|
| Flex | 1 | 2 | 3 | Flex-Stufe einstellbar |
|------|---|---|---|------------------------|

| | | | |
|-------------|-----|-----|---|
| Flex-Sperre | EIN | AUS | „Ein“ sperrt die Einstellung der Flex-Stufe im Patientenmenü „Setup“. |
|-------------|-----|-----|---|

| | | | |
|---------------------|-----|-----|---|
| Schlauchttyp-Sperre | EIN | AUS | „Ein“ sperrt die Einstellung des Schlauchtyps im Patientenmenü „Setup“. |
|---------------------|-----|-----|---|

| | | | |
|--------------|----|----|--|
| Schlauchttyp | 15 | 22 | Verwendeten Schlauchttyp einstellen: 15 mm oder 22 mm (Standard). Der jeweilige Schlauchwiderstand wird vom Gerät kompensiert. |
|--------------|----|----|--|

System One-
Widerstands-
kontrolle

0 X1 X2 X3 X4 X5

Einstellung, um bei Spezialmasken den Maskenwiderstand zu kompensieren. 0 für Standardmasken.

System One-Sperre

EIN AUS

„Ein“ sperrt die Widerstandskontrolle im Patientenmenü „Setup“.

Rampendauer

0:00 - 0:45

Dauer der Einschlaframpe von 0 (aus) bis 45 Minuten.
Wird nicht angezeigt, falls CPAP oder EPAP nur auf 4 H₂O eingestellt ist.

Rampen-Start

4,0 - (Auto min/CPAP-Druck)

Druck, bei dem die Einschlaframpe beginnt. Wird nicht angezeigt, wenn die Rampendauer 0 ist.

Stummer Modus

EIN AUS

Standardmäßig stummer Modus. Bei Therapiestart und -Stopp gibt das Gerät keinen Alarm (Signal) aus.

Nur bei angeschlossenem Befeuchter

| | | |
|--|---|---|
| System One Befeuchtung | EIN AUS | „Ein“ für automatische Steuerung der Befeuchterleistung über Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. „Aus“ für eine konstante Heizleistung. |
| Luft- befeuchter | 0 1 2 3 4 5 | Definiert die Einstellung des Befeuchters beim Therapiestart. Stufen C1 bis C5 (klassischer Modus) für konstante Heizleistung. |
| Bei Anschluss von beheiztem Schlauch Schlauchheizungs- befeuchtung | EIN AUS | „Ein“ für automatische Steuerung der Befeuchterleistung gemäß Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur in einer kalten Umgebung. |
| Luftfeuchtigkeitsstufe | 1 2 3 | Definiert die Einstellung des Befeuchters beim Therapiestart. |
| Schlauchtemperatur | 0 1 2 3 4 5 | Definiert die Einstellung des beheizten Schlauchs beim Therapiestart. |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| Auto-Ein | EIN AUS | Therapiegerät schaltet automatisch ein, wenn in das Gerät geatmet wird. |
| Auto-Aus | EIN AUS | Therapiegerät schaltet automatisch nach einer bestimmten Zeit aus, wenn die Maske abgenommen wird. |
| Maskenalarm | EIN AUS | Bei großem Leck Maskenalarm im Display und akustisches Alarmsignal. |
| Nur für REMstar Auto | | |
| Opti-Start | EIN AUS | „Ein“ ermöglicht dem Patienten, mit einem optimaleren Startdruck zu starten, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens residueller Ereignisse zu Beginn der Nacht zu reduzieren. Opti-Start wird alle 30 Stunden als Anteil des 90%-Drucks berechnet. |
| Maskentest | EIN AUS | „Ein“ erlaubt dem Patienten den Sitz der Maske vor der Therapie über eine Messung der Leckage zu überprüfen. |
| Beleuchtung Rampe | EIN AUS | „Ein“: Die Rampen-Taste und die Befeuchterstufen sind während der Therapie gedimmt beleuchtet. |
| AHI/Leck/CSR zeigen | EIN AUS | „Ein“ ermöglicht eine Abfrage von AHI/Leck/CSR durch den Patienten im Menü „Info“. |


Nur bei REMstar Auto

Split-Night

EIN AUS

„Ein“ aktiviert den Split-Night-Modus: Die erste Hälfte der Nacht wird CPAP-Therapie abgegeben, die zweite Hälfte der Nacht Auto-CPAP-Therapie.

Split-Night-Start

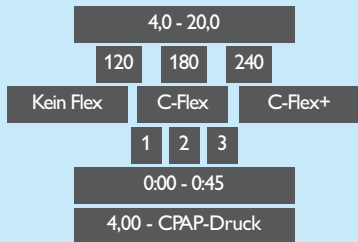

Druck der CPAP-Therapie während Split-Night (zwischen Auto min und Auto max). Dauer der CPAP-Therapie bis zum Wechsel zu Auto CPAP: 120, 180 oder 240 Minuten. Flex-Typ, Flexstufe, Rampendauer und Rampenstart.

Sprache

EN DE FR ES IT BR
DK FI NEI SW 0

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Brasilianisch Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch. 0 für Symbole.

Zurück

Zurück

Zurück ins Hauptmenü für den klinischen Benutzer.

Klinisches Menü

| | |
|----------|-------|
| Therapie | Flex |
| Info | Setup |

Therapieparameter einstellen

Wechsel in das klinische Menü zum Einstellen von Therapieparametern:

Im Patientenmenü den Menüpunkt „Setup“ anwählen (dunkel hinterlegt).

Dann **Drehkopf** und **Rampe-Taste** gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten und doppelten Piepton abwarten.

| | |
|---------|------------|
| Beenden | Erinnerung |
| Info | Setup |

Diese Einstellungen stehen im klinischen Menü zur Auswahl.



Notizen

So erreichen Sie uns

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asien

+49 7031 463 2254

Europa, Mittlerer Osten, Afrika

+49 7031 463 2254

Lateinamerika

+55 11 2125 0744

Nordamerika

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics

1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA

Kundendienst

+1 724 387 4000

Philips Respironics Asien-Pazifik

+65 6882 5282

Philips Respironics Australien

+61 (2) 9947 0440

1300 766 488 (toll free, Australia only)

Philips Respironics China

+86 400 828 6665

+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland

+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankreich

+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italien

+39 039 203 1

Philips Respironics Schweden

+46 8 120 45 900

Philips Respironics Schweiz

+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Großbritannien

+44 800 1300 845

www.philips.de/respironics



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen, und haftet nicht für eventuelle Folgen der Verwendung dieser Broschüre.

Hinweis: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungs- und Benutzeranleitung, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

Broudy TK 9/8/14 MCI 4106393 PN 1106708