



Konstante Versorgung

InnoSpire Elegance Kompressor-Verneblersystem von Philips Respironics

Robustes Design

Leistung und Eleganz vereinen sich in unserem InnoSpire Elegance, den wir für den regelmäßigen Einsatz konzipiert haben. Der InnoSpire Elegance, der erstklassige Druckluftvernebler der InnoSpire-Familie, ermöglicht rasche, effiziente und zuverlässige Arzneimittelverabreichung für Patienten im Krankenhaus und zu Hause.

Bewährte Verneblertechnologie

Der InnoSpire Elegance ist abgestimmt auf unseren wiederverwendbaren SideStream-Vernebler, der nachweislich konstant ein hochwertiges Aerosol abgibt. Sie können sich darauf verlassen, dass die Patienten über die gesamte Lebensdauer des Verneblers hinweg Aerosol von hoher Qualität erhalten.


Wichtigste Merkmale

- Kombiniert mit der bewährten SideStream-Technologie
- Kurze Behandlungszeiten von 6–8 Minuten*
- Geeignet für Dauerbetrieb sowie den Einsatz im Krankenhaus und zu Hause



PHILIPS
RESPIRONICS

Zuverlässige Aerosolabgabe

Der InnoSpire Elegance wird mit unserem hocheffizienten SideStream-Vernebler kombiniert. Dieser ist so konstruiert, dass er über ein aktives Venturi-System mehr Luft ansaugt, was zu schnellerer Arzneimittelabgabe und kürzeren Behandlungszeiten führt. Darüber hinaus verfügt er über eine einzigartige Diamantdüse, mit der der Verschleiß durch häufigen Gebrauch auf ein Mindestmaß reduziert und konstant hochwertiges Aerosol abgegeben werden kann.

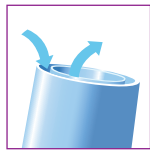

Durch Einsatz eines Venturi produziert der SideStream eine Flussrate von 16 l/min.

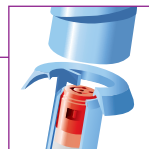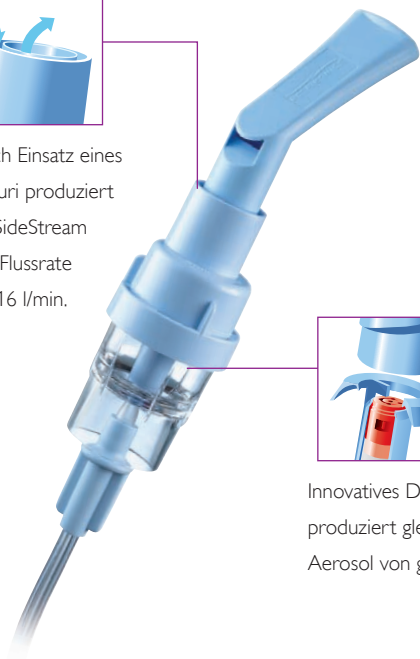

Innovatives Düsendesign produziert gleichbleibend Aerosol von guter Qualität.



Leistungsdaten

MMAD	2,9 µm
Feinpartikelfraktion	77 % unter 5 µm
Behandlungsdauer (2,5 ml flüssiges Medikament)	6 bis 8 min

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Artikelnummer
InnoSpire Elegance 230V/50 Hz	1099973
SideStream Jahrespackung, wiederverwendbar (enthält, 1 Maske Erwachsene, 1 Maske Kinder, SideStream-Vernebler, Mundstück, Schlauch)	2010A
SideStream, wiederverwendbares Kit mit Maske für Erwachsene	1223A
SideStream, wiederverwendbares Kit mit Maske für Kinder	1224A
SideStream, wiederverwendbares Kit mit Mundstück	1225A
Lufteinlassfilter (Packung mit 4 St.)	1102088
Tragetasche	1101452

Technische Daten

Stromzufuhr	230V/50 Hz, 1 A
Max. Kompressordruck	317 kPa (3,2 bar)
Durchschnittliche Flussrate	6 l/min bei 1,7 bar
Max. Flussrate	8,0 l/min
Temperaturwächter	Thermische Sicherung; Funktionstemperatur 150 °C
Gewicht	1,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	165 x 165 x 108 mm
Geräuschpegel	58 ±3 dBA

* Daten sind hinterlegt bei Philips Respironics.



Respironics, InnoSpire, Elegance und SideStream sind Marken von Koninklijke Philips N.V. und verbundener Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Mit Smartphone oder Tablet einscannen, um direkt zu unserer Website zu gelangen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.philips.de/innospire



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen und übernimmt keine Haftung für jegliche Folgen, die aus der Verwendung dieser Veröffentlichung hervorgehen.

BROUDY AM 5/12/14 MCI 4106213 PN 1106103

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 9306 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester, PO20 2FT UK

Kundendienst
+1 724 387 4000
www.philips.de/respironics